BIOTEST

Your reliable home test kits series

Ujian Kehamilan (kaset)

CE 0459

Kod Produk 9 555 223 208 029

Untuk kegunaan ujian *in-vitro* sahaja.

Simpan antara suhu 2-30ºC

TUJUAN KEGUNAAN

Ujian Kehamilan BIOTEST (Air Kencing) adalah berdasarkan sistem *rapid chromatographic immunoassay* untuk mengesan kehadiran hormon *human chorionic gonadotropin (hCG)* dalam air kencing untuk mengenal pasti kehamilan.

ARAHAN

Rujuk kepada gambarajah di bawah

Langkah 1:

- Baca arahan dengan teliti sebelum melakukan ujian.
- Kumpulkan air kencing dalam sebuah bekas yang bersih dan kering (sebaik-baiknya air kencing pertama waktu pagi). Bekas mestilah tidak mempunyai kesan bahan pencuci.

Langkah 2:


- Pastikan foil alat penguji tidak terbuka. Kemudian buka foil dan letakkan alat penguji atas permukaan yang rata.

Langkah 3:

- Dengan menggunakan pipet yang dibekalkan, titiskan 3 - 4 titik air kencing atas zon titis yang bertanda panah.

Langkah 4:

- Tunggu selama 5 minit untuk garisan dalam Tingkap Keputusan menjelma.
- Jangan membaca keputusan selepas 10 minit.

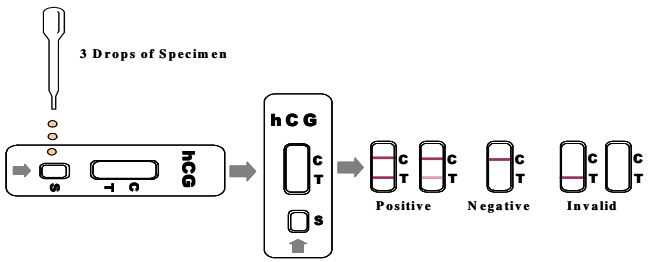

KEPUTUSAN



HAMIL

Keputusan Positif : 2 garisan.


Kehadiran 2 garisan merah dalam tingkap keputusan menandakan anda besar kemungkinan hamil. Kedua-dua garisan tidak semestinya sama jelas. Jumpa doktor untuk mengesahkan keputusan.



TIDAK HAMIL

Keputusan Negatif : 1 garisan in bahagian (C).

Kehadiran 1 garisan di bahagian C bermakna anda tidak hamil.

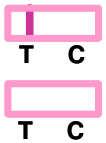

TIDAK SAH

Keputusan tidak sah : Tiada garisan atau 1 garisan di bahagian (T).

Keputusan adalah tidak sah sekiranya tiada garisan yang muncul di bahagian (C), walaupun jika garisan muncul dibahagian (T). Sila lakukan ujian dengan alat penguji yang baru.

AMARAN

1. Jangan menggunakan alat penguji yang telah melepasi tarik lupus.
2. Sekiranya foil tidak ditutup dengan baik, jangan gunakan alat penguji.
3. Lakukan ujian di tempat yang terang.
4. Gunakan alat penguji serta-merta selepas membuka foil.
5. Gunakan pipet yang dibekalkan. Jangan guna pipet yang lain.
6. Jangan sentuh bahagian tingkat keputusan. Ini akan mempengaruhi keputusan dan adalah berbahaya.
7. Buangkan bekas mengumpul air kencing selepas melakukan ujian.
8. Bekas foil mengandungi satu pek gel silika untuk menyerap kelembapan. Jangan membuka pek. Buang pek bersama alat penguji.
9. Selepas melakukan ujian, buang kesemua bahan yang telah digunakan kedalam bakul sampah. Cuci tangan dengan segera.
10. Air kencing mestilah dituang kedalam tandas.

KANDUNGAN

- Alat Penguji
- Pipet
- Desiccant / Gel Silika
- Surat penerangan

MAKNA KEPUTUSAN

Keputusan positif menandakan bahawa air kencing anda mengandungi hormon hCG dimana kepekatannya adalah sama atau lebih daripada 25mIU/ml iaitu kepekaan alat penguji ini. Anda boleh dianggap sebagai hamil. Namun, dapatkan nasihat doktor yang akan dapat memberi petunjuk seterusnya. Sekiranya anda sedang memakan sebarang ubat, beritahu doktor dengan segera untuk mempastikan ia tidak membahayakan bayi.

Sekiranya keputusan adalah negatif, ia bermakna tiada hormon hCG yang dikesan dalam air kencing dan anda boleh dianggap tidak hamil. Sekiranya haid anda masih tidak datang selepas 1 minggu, lakukan ujian sekali lagi. Jika ujian masih negatif, anda tidak hamil. Namun kelewatan haid mungkin disebabkan oleh keadaan kesihatan yang lain dan anda dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor segera.

Sekiranya kitaran haid anda tidak tepat, ia mungkin sukar untuk mengenal pasti bila anda lewat. Jika keputusan anda negatif dan haid anda masih lewat selepas beberapa hari, lakukan ujian sekali lagi. Anda mungkin tersalah mengira kitaran haid anda.

HAD ALAT PENGUJI

Alat penguji hanya boleh digunakan sekali sahaja dan pastikan arahan diikuti dengan tepat. Walaupun alat penguji ini adalah peka dan tepat, namun kemungkinan keputusan yang tidak benar masih boleh wujud. Dapatkan nasihat doktor sekirannya anda dapati keputusan tidak tepat. Sesetengah keadaan kesihatan juga mungkin mempengaruhi keputusan alat penguji ini.

SOALAN LAZIM & JAWAPAN

S. Bagaimana alat penguji ini berfungsi?
J. Apabila wanita hamil, badannya akan mengeluarkan sejenis hormon yang dikenali sebagai hCG (human Chorionic Gonadotropin). Hormon ini boleh dikesan dalam air kencing seawal hari pertama kelewatan haid. Keputusan positif bermakna terdapat kehadiran hCG dalam air kencing dan anda boleh dianggap sebagai hamil. Keputusan negatif bermakna tiada kesan hCG dan anda dianggap tidak hamil.

S. Jika satu garisan lebih cerah daripada garisan yang kedua, adakah saya masih hamil?
J. Ya, anda boleh dianggap hamil.

S. Jika saya tersalah kira titisan air kencing apabila melakukan ujian, adakah keputusan saya masih tepat?
J. Sekiranya garisan di bahagian C muncul, ujian telah dijalankan dengan betul. Sekiranya garisan tidak muncul di bahagian C, tambahkan 2 titis lagi, Sekiranya garisan tidak muncul di bahagian C selepas 5 minit, keputusan adalah dianggap tidak sah. Lakukan ujian dengan alat penguji yang baru.

S. Bagaimana jika saya tidak pasti dengan garisan di bahagian T?
J. Lakukan ujian sekali lagi selepas 3 hari dengan menggunakan alat penguji yang baru.

S. Bolehkah keputusan bertukar?
J. Keputusan positif tidak akan bertukar walaupun selepas beberapa jam. Namun keputusan negatif tidak harus dibaca kembali selepas 10 minit.

IFU-BT-HCG-C.v2.2011

Dikilang oleh Atlas Medical
William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WX, UK
BIOTEST adalah hak-milik Bio-gro Sdn Bhd
www.bio-test.info