BIOTEST

Your reliable home test kits series

怀孕测试卡

CE 0459

产品编号 9 555 223 208 029

用于体外诊断与自测

收藏在 2 - 30°C

用途

BIOTEST怀孕测试卡（尿液）是一种采用快速免疫层析法来定性测试出尿液里的人绒毛膜促性腺激素(hCG)，以协助诊断早期妊娠。

怎样测试

请看以下图解

步骤一

- 在使用测试卡前，请先仔细阅读指示。
- 将新的尿液样本（尽量收集早晨第一次的排尿）收集在一个**干净**的一次性容器里。**容器不能有微量的清洁剂**。

步骤二


- 检查测试卡包装是否密封，然后把包装打开。将测试卡置放在平面上。

步骤三

- 利用所给予的吸管，将三到四滴的尿液滴在测试卡的“S”区里。

步骤四

- 五分钟后，阅读结果。请注意结果视窗（长方格区）里的线条。
- 请不要阅读10分钟后的结果。

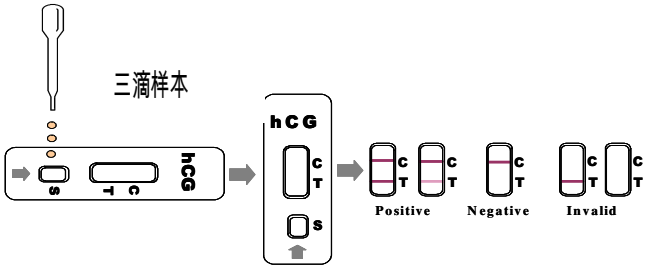

怎样阅读测试结果



怀孕

阳性结果：两条线

结果视窗里的两条红线表示您可能怀孕了。

其中一条线会比另一条浅；这两条线的深浅不一定要一样。


请见您的医生以作进一步的证实。



非怀孕

阴性结果：（C）区有一线条

（C）控制区的红线表示您可能没有怀孕。

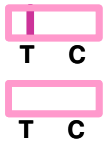

结果无效

结果无效：完全没有线条或（T）区有一线条

如果（C）控制区完全没有红线（即使（T）区有出现红线），这表示测试结果无效。您应重复采用新的测试卡来测试。

预防措施与忠告

1. 若测试器超过了截止日期，请勿使用。
2. 如果测试卡包装没有完全封密，请勿使用。
3. 您应该选择光亮的地方来进行测试。
4. 打开包装后，请即刻进行测试。
5. 请使用所给予的吸管，不要使用其他的吸管。
6. 请不要触摸结果视窗。这会影响测试结果与造成个人危害。
7. 请使用一次性容器，测试完了就把它处置。
8. 包装里有一包干燥剂，是用来防止潮湿。请别打开，在测试完毕后与测试卡一起处置.
9. 测试完毕后，把全部用过的东西包在塑胶袋里处置。请别忘记把手洗干净。
10. 请将剩下的样本扔进马桶然后抽水。

内含

- 测试卡
- 吸管
- 干燥剂
- 产品说明书

测试结果表示什么

阳性结果表示您的尿液里含有人绒毛膜促性腺激素(hCG，怀孕荷尔蒙)，浓度是25mIU/ml. 或以上， 这是测试棒的敏感度， 可以说您已怀孕了。
您应该询问医生，得到适当的产前护理。 如有食用药物，
请即刻通知医生以确保对宝宝安全。

阴性结果表示，您的尿液里不含hCG，可以说您并没有怀孕。过了一个星期，如果月经还没来潮，请在两天后再进行测试。如果结果还是阴性，您怀孕的可能性极低。可是，月事没有来潮有可能与您的健康状况有关，请即刻寻求医生的诊断。

如果您的月经周期不规律，那要知道那一天应有月事来潮，是困难的。如果测试结果是阴性而月事来潮应是几天后，那您极可能算错了日期。两天后，再进行第二次的测试。

测试限制

这测试卡不能再从复使用。测试时一要遵照指示，以确保测试成功。虽然这项测试准确率很高，但是有时候会有少数错误的结果。如果您得到意想不到与不寻常的结果，请询问医生。一些健康状况会使到结果错误与不寻常。

问与答

问。这项测试的原理是什么?
答。当一位妇女怀孕时，她的身体就会制造一种特别的荷尔蒙叫做hCG(人绒毛膜促性腺激素)。这荷尔蒙，如果早的话会在月经周期的第一天就出现在尿液里。阳性结果表示您的尿液里含有hCG，可以说您已怀孕了。阴性结果表示您的尿液里不含有hCG，所以并非怀孕。

问。如果两条线出现，而其中一条比另一条浅，我是否怀孕了?
答。是的，您可确定是怀孕了。

问。如果在滴尿液样本时，我算错了有几滴，那测试还会准确吗?
通常多一滴或少一滴样本，都不会影响结果。只要“C”区有一条红线，测试就算成功了。如果“C”区并没有红线，再滴一到两滴的样本进“S”区里。过了五分钟，“C”区如果仍然没出现红线，那测试就无效。您应该重新使用新的测试卡，再进行测试。

问。如果我不确定“T”区的红线条?
答。我们建议三天后用新的测试卡重复测试。

问。过了一段时间，测试结果会改变吗?
答。测试完毕后，阳性结果是不会改变的，几小时后也不会。但是，阴性结果在10分钟后就不可阅读了。

IFU-BT-HCG-C.v2.2011

Atlas Medical 制造

William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WX, UK

BIOTEST 是Bio-Gro Sdn Bhd 的注册商标

www.bio-test.info