BIOTEST

Your reliable home test kits series


ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (แบบปัสสาวะผ่าน)

รหัสผลิตภัณฑ์ 9 555 223 208 012
สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายและใช้ในการทดสอบด้วยตนเอง
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 - 30°C

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบไหลผ่าน (ปัสสาวะ) ของ BIOTEST เป็นวิธีการตรวจสอบเชิงโครมาโตกราฟีอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจสอบฮอร์โมน human chorionic gonadotropin (hCG) ในปัสสาวะในเชิงปริมาณเพื่อช่วยตรวจสอบการตั้งครรภ์ในช่วงต้น

วิธีการใช้งาน

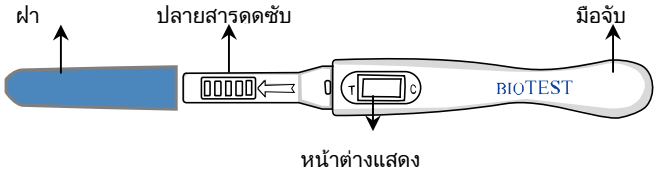

ขั้นตอนที่ 1:
- อ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนใช้งาน
- แนะนำให้ทำการทดสอบกับปัสสาวะแรกในตอนเช้า เนื่องจากปัสสาวะแรกในตอนเช้าจะมีปริมาณ hCG สูงสุด
- ตรวจสอบว่าถุงมีการปิดสนิท จากนั้นแกะถุงออก


ขั้นตอนที่ 2:
- ถอดฝาครอบปิดออกจากอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3:
- ถืออุปกรณ์ตรงมือจับโดยให้ปลายที่มีสารดูดซับชี้ลงด้านล่าง
- ให้ปัสสาวะผ่านอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนปลายทั้งหมดของอุปกรณ์เปียก
  (หมายเหตุ: ท่านสามารถปัสสาวะลงในภาชนะที่สะอาดและแห้งได้ จากนั้นจุ่มเฉพาะส่วนปลายที่มีสารดูดซับของชุดทดสอบแบบปัสสาวะผ่านลงในปัสสาวะอย่างน้อย 10 วินาที)
- นำอุปกรณ์ออก (ท่านอาจปิดฝาครอบกลับ - การปิดฝาครอบกลับไม่ส่งผลต่อผลการทดสอบ)


ขั้นตอนที่ 4:
- วางอุปกรณ์บนพื้นเรียบโดยหันด้านหน้าต่างแสดงผลขึ้น ท่านจะสังเกตเห็นสีชมพูกำลังมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าต่างแสดงผลการทดสอบ เป็นการบ่งบอกว่ากำลังเกิดปฏิกิริยาการทดสอบขึ้น

ขั้นตอนที่ 5:
- อ่านผลการทดสอบภายใน 5 นาที โดยจะมีแถบสี (เส้น) ปรากฏขึ้นที่หน้าต่างแสดงผลการทดสอบ
- ไม่ควรอ่านผลการทดสอบหลังจากผ่านไปแล้ว 5 นาที


วิธีการอ่านผลการทดสอบ

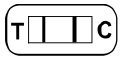

ตั้งครรภ์
ผลการทดสอบเป็นบวก: 2 แถบ
เส้นสีแดง 2 เส้นปรากฏบนหน้าต่างแสดงผลหมายความว่าท่านอาจมีการตั้งครรภ์ เส้นหนึ่งอาจจางกว่าอีกเส้นหนึ่ง ไม่มีความสอดคล้องกัน โปรดตรวจสอบกับแพทย์เพื่อยืนยันถึงการตั้งครรภ์.

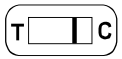

ไม่ตั้งครรภ์
ผลการทดสอบเป็นลบ: 1 แถบในบริเวณ (C)
เส้นสีแดง 1 เส้นปรากฏในบริเวณควบคุม (C) หมายความว่าท่านอาจไม่มีการตั้งครรภ์

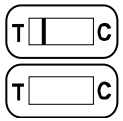

ผลการทดสอบเป็นโมฆะ
ผลการทดสอบเป็นโมฆะ: ไม่มีแถบ หรือมี 1 แถบในบริเวณ (T)
ผลการทดสอบเป็นโมฆะหากไม่มีเส้นสีแดงปรากฏในบริเวณควบคุม (C) แม้ว่าจะมีเส้นปรากฏในบริเวณทดสอบ (T) ท่านควรดำเนินการทดสอบซ้ำด้วยชุดการทดสอบใหม่

ข้อควรระวังและคำเตือน

1. ห้ามใช้งานชุดทดสอบหลังจากวันหมดอายุ
2. หากบรรจุภัณฑ์ปิดไม่สนิทห้ามใช้งานชุดทดสอบ
3. การทดสอบควรมีการดำเนินการในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. ใช้อุปกรณ์ในการทดสอบทันทีหลังจากที่ทำการเปิด
5. ห้ามสัมผัสหน้าต่างแสดงผลการทดสอบ เพราะจะส่งผลต่อการทดสอบและอาจก่อให้เกิดอันตรายส่วนบุคคล
6. ในถุงจะมีซองสารดูดความชื้นเอาไว้ดูดความชื้น ห้ามเปิดซองนี้ ทิ้งไปพร้อมกับส่วนที่เหลือของชุดทดสอบ
7. เมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้น ให้ห่อทุกอย่างที่ใช้แล้วไว้ในถุงพลาสติกและทิ้งลงถังขยะ แล้วล้างมืออย่างเหมาะสม

สิ่งที่บรรจุมา

- อุปกรณ์ทดสอบ
- สารดูดความชื้น
- ใบแทรกของบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายผลการทดสอบ

ผลการทดสอบเป็นบวกบ่งชี้ว่าในปัสสาวะของท่านมีฮอร์โมน hCG (ฮอร์โมนการตั้งครรภ์) ที่ความเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับ 25mIU/ml ซึ่งเป็นช่วงความไวของอุปกรณ์ของเรา และอาจถือว่าท่านมีการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับการฝากครรภ์ได้ดีที่สุด หากท่านเข้ารับการรักษาโรคควรแจ้งแพทย์ของท่านทันที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการรักษามีความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์

ผลการทดสอบเป็นลบหมายความว่าไม่มีการตรวจพบฮอร์โมน hCG และอาจถือได้ว่าท่านไม่ได้ตั้งครรภ์ หากผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์ และประจำเดือนของท่านยังคงไม่มา ควรทำการทดสอบใหม่หลังจากผ่านไป 2 วัน หากผลการทดสอบยังคงเป็นลบ มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ท่านจะตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การที่ประจำเดือนไม่มีอาจมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จึงควรไปพบแพทย์ทันที

หากรอบประจำเดือนของท่านไม่ปกติ เป็นการยากที่จะทราบได้ว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ หากผลการทดสอบของท่านแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งครรภ์ และประจำเดือนยังไม่มาหลังจากผ่านไป 2-3 วัน ท่านอาจมีการคำนวณรอบประจำเดือนผิดพลาด และควรใช้ชุดทดสอบที่ 2 หลังจากผ่านไป 2 วัน

ข้อจำกัดของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มันจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องเท่านั้น แม้ว่าชุดทดสอบจะมีความแม่นยำสูงในการตรวจสอบการตั้งครรภ์ แต่ก็อาจให้ผลที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีความเป็นไปได้ต่ำเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบกับแพทย์ของท่านหากว่าผลการทดสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหรือไม่สอดคล้อง นอกจากนี้ภาวะสุขภาพร่างกายบางอย่างยังเป็นสาเหตุทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดหรือผิดปกติ

ข้อสงสัยและคำตอบ

Q. ชุดทดสอบทำงานอย่างไร?
A. เมื่อผู้หญิงมีการตั้งครรภ์ ร่างกายจะมีการสร้างฮอร์โมนเฉพาะในการตั้งครรภ์ที่เรียกว่า hCG (human Chorionic Gonadotropin) ฮอร์โมนนี้จะมีการปรากฏในปัสสาวะในช่วงวันแรกๆ ที่ประจำเดือนขาด ผลการทดสอบที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าปัสสาวะของท่านมีฮอร์โมน hCG และอาจถือได้ว่าท่านตั้งครรภ์ ผลการทดสอบที่เป็นลบหมายความว่าไม่มีการตรวจพบฮอร์โมน hCG และอาจถือได้ว่าท่านไม่ได้ตั้งครรภ์

Q. หากมีเส้นสีแดงปรากฏขึ้น 2 เส้น แต่เส้นหนึ่งจางกว่าอีกเส้นหนึ่งมาก จะตั้งครรภ์หรือไม่?
A. อาจถือว่าท่านมีการตั้งครรภ์

Q. ผลการทดสอบจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เมื่อเวลาผ่านไป?
A. ผลการทดสอบที่เป็นบวกอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทำการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แม้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมง แต่ผลการทดสอบที่เป็นลบจะไม่สามารถอ่านได้อีกหลังจากผ่านไป 10 นาที

Q. ควรทำอย่างไรหากผลการทดสอบเป็นลบ แต่ยังคงคิดว่าตนเองตั้งครรภ์
A. ท่านอาจมีการคำนวณรอบประจำเดือนผิดพลาด หากในอีกสัปดาห์ประจำเดือนยังคงไม่มาให้ทำการทดสอบซ้ำ และหากผลการทดสอบยังคงเป็นลบและประจำเดือนของท่านยังคงไม่มาควรไปพบแพทย์

Q. หากยังคงสงสัยเกี่ยวกับเส้นสีชมพูอีกเส้นในบริเวณ “T” ควรทำอย่างไร?
A. แนะนำให้ท่านทำการทดสอบใหม่ในอีก 3 วันถัดมาโดยใช้ชุดทดสอบใหม่

ผลิตโดย Atlas Medical
William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WX, UK
BIOTEST เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bio-gro Sdn Bhd.
www.bio-test.info