BIOTEST

Your reliable home test kits series

单步验孕柄

产品编号 9 555223 208272

用于体外诊断与自测

收藏在 2-30°C

用途

BioTest单步验孕柄（尿液）是一种采用快速免疫层析法来定性测试出尿液里的人绒毛膜促性腺激素(hCG)，以协助诊断早期妊娠。


内含

- 验孕柄
- 干燥剂
- 产品说明书

预防措施与忠告


1. 若验孕柄超越了截止日期，请勿使用。
2. 如果验孕柄包装没有完全封密，请勿使用。
3. 您应该选择在明亮的地方来进行测试。
4. 打开包装后，请即刻进行测试。
5. 包装里有一包干燥剂，是用来防止潮湿。请别打开，在测试完毕后与验孕柄一起处置。
6. 请将测试后的验孕柄放在塑袋里扔掉，然后将手洗净。

如何使用

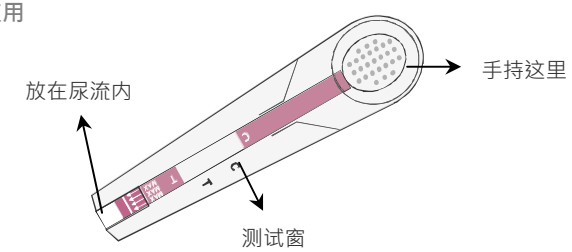

在使用验孕柄前，请先仔细阅读指示。尽量使用早晨第一次的排尿，因为它含有最高的hCG。检查验孕柄包装是否密封，然后把包装打开。将验孕柄的收集尖端放在尿流内3秒钟。只需等一分钟就可知道结果。测试结果会清楚的显示在测试窗内。


怎样阅读测试结果

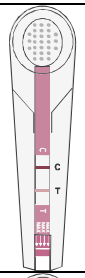

怀孕

阳性结果：两条线


测试窗里的两条红线表示您可能怀孕了。其中一条线会比另一条浅；这两条线的深浅不一定要一样。请咨询医生以作进一步的证实。

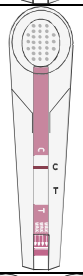

非怀孕

阴性结果：（C）区有一线条

（C）控制区的红线表示您可能没有怀孕。

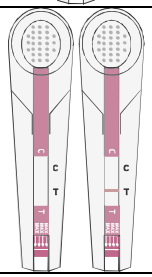

结果无效

结果无效：完全没有线条或（T）区有一线条

如果（C）控制区完全没有红线（即使（T）区有出现红线），这表示测试结果无效。您应重复采用新的验孕柄来测试。

测试结果表示什么

阳性结果表示您的尿液里含有人绒毛膜促性腺激素(hCG，怀孕荷尔蒙)，浓度是 25mIU/ml. 或以上， 这是验孕柄的敏感度，
可以说您已怀孕了。 您应该咨询 医生，以得到适当的产前护理。
如有食用药物， 请即刻通知医生，以确保宝宝的安全。

阴性结果表示您的尿液里不含hCG，可以说您并没有怀孕。过了一个星期，如果月经还没来潮，请在两天后再进行测试。如果结果还是阴性，您怀孕的可能性极低。月事没有来潮也有可能与您的健康状况有关，请即刻寻求医生的诊断。

如果您的月经周期不规律，就很难确定那一天应是月事的来潮。如果测试结果是阴性而月事来潮应该是几天后，那您极可能算错了日期。两天后，再进行第二次的测试。

测试限制

验孕柄不能再从复使用。测试时一要遵照指示，以确保测试成功。虽然这项测试准确率很高，但是有时候会有少数的假性结果。如果您得到意想不到与不寻常的结果，请咨询医生。一些健康状况会促成假性与不寻常的测试结果。

问与答

问。这项测试的原理是什么？
答。当一位妇女怀孕时，她的身体就会制造一种特别的荷尔蒙叫做hCG(人绒毛膜促性腺激素)。阳性结果表示您的尿液里含有hCG，可以说您已怀孕了。阴性结果表示您的尿液里不含有hCG，所以并非怀孕。

问。如果两条线出现，而其中一条比另一条浅，我是否怀孕了？
答。是的，您可确定是怀孕了。

问。如果我算错了将验孕柄的收集尖端放在尿流内的时间，那测试还会准确吗？
只要"C"区有一条红线，测试就算成功了。过了五分钟，"C"区如果仍然没出现红线，那测试就无效。您应该重新使用新的验孕柄再进行测试。

问。如果我不确定"T"区的红线条？
答。我们建议三天后用新的验孕柄重复测试。

问。过了一段时间，测试结果会改变吗？
答。测试完毕后，阳性结果是不会改变的，几小时后也不会。但是，阴性结果在10分钟后就不可阅读了。

Atlas Medical 制造
William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WX, UK
BIOTEST 是 Bio-Gro Sdn Bhd 的注册商标
www.bio-test.info